

Gebruikershandleiding

Tropaz app



Inhoudsopgave

1 Algemeen	4
2 Installatie van Tropaz app	4
2.1 Installatie op Android telefoon en tablet.....	4
2.2 Installatie op iPhone/ iPad.....	4
3 Activatie van de Tropaz App.....	4
3.1 Activatie eerste gebruik Trombosedienst selecteren.....	4
3.2 Activatie eerste gebruik QR-code scannen.....	5
3.3 Een mobiel apparaat verwijderen	6
3.3 Pincode vergeten	6
3.4 Pincode onjuist	7
4 Tropaz app voor reguliere gebruikers	7
4.1 Algemeen	7
4.2 Vandaag	7
4.3 Afspraak	7
4.4 Kalender	8
4.5 Historie.....	8
4.6 Menu	9
4.6.1 Berichten	9
4.6.2 Bijzonderheden	9
4.6.3 Contactgegevens.....	13
4.6.4 Instellingen	13
4.6.5 Help	14
4.6.6 Afmelden.....	15
5 Tropaz app voor zelfmeters	16
5.1 Algemeen	16
5.2 Vandaag	16
5.3 Afspraak	16
5.4 Kalender	17
5.5 INR	17
5.5.1 INR invoeren	17
5.5.2 Bijzonderheden	19
5.6 Menu	19
5.6.1 Berichten	19
5.6.2 Bijzonderheden	19

5.6.3 Historie	23
5.6.4 Bluetooth	23
5.6.5 Contactgegevens.....	25
5.6.6 Instellingen	25
5.6.7 Help	26
5.6.8 Afmelden.....	27
6 Tropaz app voor zelfdoseerders	28
6.1 Algemeen	28
6.2 Vandaag	28
6.3 Afspraak	28
6.4 Kalender	29
6.5 INR	29
6.5.1 Datum	30
6.5.2 INR invoeren	30
6.5.3 Doseerschema	31
6.5.4 Bijzonderheden	32
6.6 Menu	32
6.6.1 Berichten	32
6.6.2 Bijzonderheden	32
6.6.3 Historie	36
6.6.4 Bluetooth	36
6.6.5 Contactgegevens.....	38
6.6.6 Instellingen	38
6.6.7 Help	39
6.6.8 Afmelden.....	40

1 Algemeen

De Tropaz app is beschikbaar voor cliënten die onder behandeling zijn bij de trombosedienst. De app kan gebruikt worden door patiënten die regulier gecontroleerd worden, door zelfmeters en zelfdoseerders. Per patiëntencategorie verschilt het gebruik van de Tropaz app enigszins.

1. Reguliere patiënt: De trombosedienst neemt bloed af voor een INR waarde en de trombosedienst verzorgt de dosering (voor het gebruik van de app zie hoofdstuk 2, 3 en 4).
2. Zelfmeters: Zij meten zelf de INR waarde en de trombosedienst verzorgt de dosering (voor het gebruik van de app zie hoofdstuk 2, 3 en 5).
3. Zelfdoseerders: Zij meten zelf de INR waarde en bepalen zelf de dosering (voor het gebruik van de app zie hoofdstuk 2, 3 en 6).

2 Installatie van Tropaz app

Om de Tropaz app te kunnen installeren heeft u een account nodig voor het webportaal Tropaz. Neem contact op met uw trombosedienst indien u nog geen Tropaz account heeft.



2.1 Installatie op Android telefoon en tablet

Op uw Android telefoon/tablet gaat u naar de Google Play store en zoekt u '**Tropaz**'. U selecteert de Tropaz app (zie bovenstaande afbeelding) en klikt op installeren. Beantwoordt u eventuele verdere vragen die Google Play stelt.

2.2 Installatie op iPhone/ iPad

Op uw iPhone of iPad gaat u naar de App store en zoekt u op '**Tropaz**'. U selecteert de Tropaz app (zie bovenstaande afbeelding) en klikt op installeren. Beantwoordt u eventuele verdere vragen die de App store stelt.

3 Activatie van de Tropaz App

U kunt de app activeren door middel van uw Trombosedienst te selecteren (zie paragraaf 3.1) of door de QR-code in Tropaz te scannen (zie paragraaf 3.2).

3.1 Activatie eerste gebruik Trombosedienst selecteren

Als u na installatie de app voor het eerst opstart ziet u onderstaand scherm.

Selecteer uw trombosedienst. Log vervolgens in met de gegevens van uw Tropaz account. De app zal vragen om een pincode in te vullen. U mag zelf een 5-cijferige pincode verzinnen waarmee u voortaan in de Tropaz app in wilt loggen. Om er zeker van te zijn dat u de juiste pincode heeft ingevoerd moet u de code na de eerste keer nogmaals invoeren. Op uw telefoon ziet u hetzelfde scherm, maar met de vraag de pincode te herhalen.

Als u tweemaal dezelfde pincode heeft ingevoerd, wordt u automatisch ingelogd in de Tropaz app. Voortaan hoeft u alleen de ingestelde pincode in te voeren. Ga zorgvuldig met deze pincode om.

U kunt meerdere telefoons/tablets met de Tropaz app toegang geven tot uw gegevens. U herhaalt dan per telefoon/tablet de stappen die in deze paragraaf beschreven zijn.

3.2 Activatie eerste gebruik QR-code scannen


Om uw account te activeren door middel van de QR-code te scannen kunt u de onderstaande stappen volgen:

1. Ga naar uw Tropaz website en log in met de gegevens van uw Tropaz account.
2. Ga naar het tabblad 'Mijn gegevens'.
3. Ga naar subtabblad 'Mobiele apparaten'.
4. Klik rechts onderaan op de knop 'Toevoegen'.
5. Klik in de Tropaz app op 'QR-code scannen' en scan de QR code in Tropaz.

Gebruikershandleiding Tropaz app

Vervolgens zal de app vragen om een pincode in te vullen. U mag zelf een 5-cijferige pincode verzinnen waarmee u voortaan in de Tropaz app in wilt loggen. Om er zeker van te zijn dat u de juiste pincode heeft ingevoerd moet u de code na de eerste keer nogmaals invoeren. Op uw telefoon ziet u hetzelfde scherm, maar met de vraag de pincode te herhalen.

Als u tweemaal dezelfde pincode heeft ingevoerd, wordt u automatisch ingelogd in de Tropaz app. Voortaan hoeft u alleen de ingestelde pincode in te voeren. Ga zorgvuldig met deze pincode om.

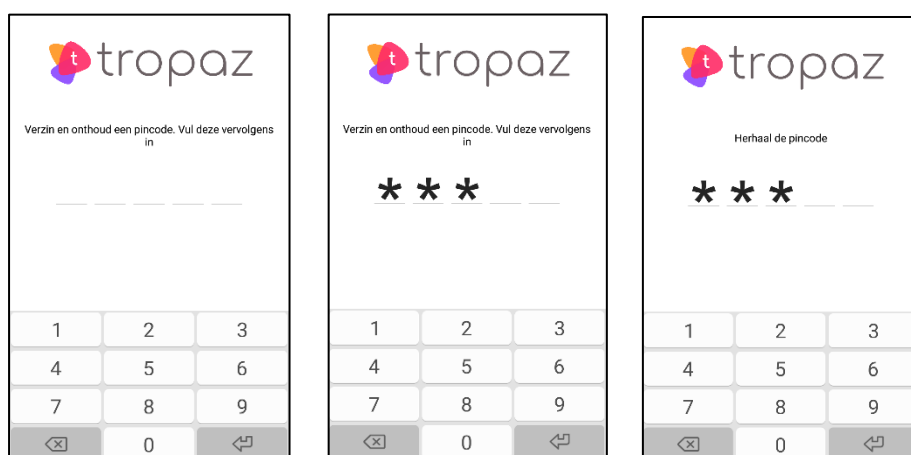

U kunt meerdere telefoons/tablets met de Tropaz app toegang geven tot uw gegevens. U herhaalt dan per telefoon/tablet de stappen die in deze paragraaf beschreven zijn.

3.3 Een mobiel apparaat verwijderen

Als uw telefoon/tablet is kwijtgeraakt, is gestolen of om een andere reden niet meer in gebruik is, kunt u het betreffende apparaat uit de Tropaz webportaal verwijderen. Zodra het apparaat verwijderd is, heeft de Tropaz app geen toegang meer tot uw gegevens.

1. Log in op het Tropaz webportaal via PC, laptop of tablet.
2. Ga naar het tabblad 'Mijn gegevens' en vervolgens naar subtabblad 'Mobiele apparaten'.
3. Klik vervolgens op de 'Verwijder' achter het apparaat waarvan u wilt dat het geen toegang meer heeft tot uw gegevens.
4. U krijgt vervolgens de vraag of u het apparaat wilt verwijderen. Klik op 'Ja'.

Home

Bijzonderheden / Ingrepen

Bijzonderhedenhistorie

Berichten

Mijn gegevens

Informatie

Uitloggen

Wachtwoord wijzigen

Mobiele apparaten

Patientgegevens

Datum	Omschrijving	Platform	Versie	Status	Opties
06-04-2018	Vodafone Smart Tab 4G		4.4.4	Actief	Verwijder
14-04-2018	SM-G935F		7.0	Actief	Verwijder

3.3 Pincode vergeten

Als u uw pincode bent vergeten, volgt u dezelfde procedure als hierboven beschreven. Vervolgens start u de app weer op zodat deze opnieuw geregistreerd kan worden met

behulp van het e-mailadres en wachtwoord van het Tropaz account. De app hoeft dus niet van de telefoon verwijderd te worden.

3.4 Pincode onjuist

Indien u een verkeerde pincode invoert krijgt u de melding 'Aanmelden mislukt'.

Let op: Wanneer u de pincode **x** maal verkeerd invult, dan is ook u Tropaz account geblokkeerd. U dient dan een nieuw wachtwoord aan te vragen om weer in te kunnen loggen in Tropaz.

4 Tropaz app voor reguliere gebruikers


4.1 Algemeen

De gegevens in de app zijn pas na **17.00** uur definitief. Als er een nieuwe kalender voor u is aangemaakt of er een bericht naar u is verstuurd, wordt u hiervan op de hoogte gesteld middels een e-mail. Let op gedurende de dag kunnen er nog wijzigingen aangebracht worden in uw doseerschema. Wij adviseren u daarom om pas na **17.00** uur uw tabletten in te nemen.

Op het scherm staan onderaan 4 selectiemogelijkheden, te weten: 'Vandaag', 'Afspraak', 'Kalender' en 'Historie'. De Tropaz app start met de selectie 'Vandaag'. U kunt andere selecties selecteren door erop te klikken. De selecties worden in de volgende paragrafen besproken.

4.2 Vandaag


U ziet direct de hoeveelheid tabletten van uw antistollingsmiddel dat u vandaag in mag nemen.

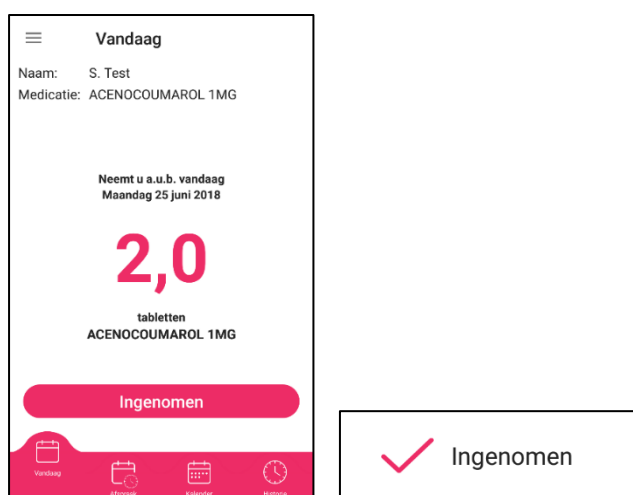

Wanneer u de tabletten van de trombosedienst heeft ingenomen, kunt u dat hier aangeven door onder het aantal tabletten op 'Ingenomen' te klikken. Dit kunt u dan tevens terug zien in de kalender, zie paragraaf 4.4.

4.3 Afspraak

Op het tabblad 'Afspraak' vindt u uw volgende controledatum bij de trombosedienst.

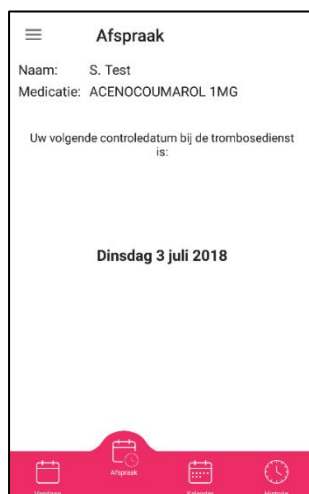

4.4 Kalender

Op het kalenderscherm in de Tropaz app ziet u de meest recente doseringskalender met per dag het aantal tabletten antistollingsmiddel dat u mag innemen. Datums in het verleden zijn lichtgrijs weergegeven. De huidige dag (vandaag) is roze en de toekomstige dagen zijn zwart. De twee laatste kalenders bekend bij de trombosedienst worden getoond in de app.

Datum	Aantal tabletten
Vrijdag 22 juni 2018	2,0
Zaterdag 23 juni 2018	2,0
Zondag 24 juni 2018	2,0
Maandag 25 juni 2018	2,0 ✓
Dinsdag 26 juni 2018	2,0
Woensdag 27 juni 2018	2,0
Donderdag 28 juni 2018	2,0

Indien u op het scherm 'Vandaag' heeft aangeklikt 'Ingenomen', dan wordt er in dit scherm een vinkje geplaatst achter de betreffende datum. Zo kunt u de gedurende kalender in de gaten houden of u elke dag uw tabletten heeft ingenomen.

4.5 Historie

Op het historiescherm ziet u de bij u in het verleden gemeten INR waarden op volgorde van datum weergegeven.

Historie	
Naam: S. Test	
Medicatie: ACENOCOUMAROL 1MG	
Datum	INR waarde
Donderdag 21 juni 2018	2,5
Maandag 28 mei 2018	2,5
Maandag 9 april 2018	2,7
Vrijdag 6 april 2018	4,2
Vrijdag 23 maart 2018	2,4
Dinsdag 13 maart 2018	2,8
Dinsdag 9 januari 2018	2,5
Dinsdag 12 november 2018	

4.6 Menu

Het menu van de Tropaz app vindt u linksboven op het scherm. In het menu kunt u kiezen voor Berichten, Bijzonderheden, Contactgegevens, Instellingen, Help of Afmelden.



4.6.1 Berichten

Hier vindt u de berichten die zijn verstuurd aan of van uw trombosedienst. Met 'Nieuw' kunt u een nieuw bericht aan de trombosedienst versturen. Met 'Beantwoorden' kunt u een bericht van de trombosedienst beantwoorden.

4.6.2 Bijzonderheden

In dit scherm kunt u eventuele bijzonderheden doorgeven aan de trombosedienst.

Bijzonderheden

Medicatie?

Bloeding?

Medische ingreep?

Koorts

Braken

Diarree

Tabletten vergeten

Vakantie

Ongeval/valpartij

Overig

Hieronder volgt een korte toelichting per bijzonderheid en worden de bijbehorende schermen met de gevraagde invoervelden uitgelegd.

4.6.2.1 Medicatie

Medicatie?

Als u een nieuw medicijn bent gaan gebruiken of gaat gebruiken dan kunt u dat hier

invoeren door de startdatum en de naam van het medicijn in te voeren.

Als u het medicijn een korte periode gebruikt, bijvoorbeeld een antibioticumkuur, kunt u ook direct de stopdatum invoeren. Als u stopt met het gebruik van een medicijn dan kunt u de stopdatum invullen en de naam van het betreffende medicijn. Het is dan niet verplicht om ook de startdatum in te voeren. Zo nodig geeft u toelichting door bij 'Overig' een toelichting te geven. Deze mogelijkheid staat als laatste in de lijst van de bijzonderheden.

Er kunnen op één scherm 2 nieuwe medicijnen opgegeven worden.

4.6.2.2 Bloeding

Bij deze bijzonderheid kan u de datum en de soort bloeding aangeven. Zo nodig geeft u een toelichting bij 'Overig'.

4.6.2.3 Medische ingreep

Hier kunt u een geplande ingreep doorgeven. Voer de datum en daarna de soort ingreep in. Vervolgens kunt de naam van uw behandelend arts en de naam van het ziekenhuis invoeren. Als uw specialist of trombosedienst heeft aangegeven dat de INR naar een bepaalde waarde moet worden verlaagd, dan kunt u dit ook invoeren.

Geplande ingreep

Datum

Omschrijving

☐ Opname

☐ Dagbehandeling

Naam specialist

Naam ziekenhuis

Specialisme

Gewenste INR volgens uw specialist -

Opmerkingen

4.6.2.4 Koorts

Hier kunt u, met de bijbehorende begindatum en einddatum opgeven als u koorts heeft gehad en hoe hoog de koorts was. Zo nodig geeft u een toelichting bij 'Overig'.

Koorts

Van

T/m

Temperatuur (graden)

4.6.2.5 Braken

Hier kunt u, met de bijbehorende begindatum en einddatum opgeven als u gebraakt heeft. Zo nodig geeft u een toelichting bij 'Overig'.

Braken

Van

T/m

☐ Heeft u gebraakt binnen 1/2 uur na inname antistollingstabletten?

4.6.2.6 Diarree

Hier kunt u, met de bijbehorende begindatum en einddatum opgeven als u diarree heeft gehad. Zo nodig geeft u een toelichting bij 'Overig'.

Diarree

Van

T/m

4.6.2.7 Tabletten vergeten

Hier kunt u aangeven wanneer u de tabletten vergeten bent, met de bijbehorende datum.

4.6.2.8 Vakantie

Hier kunt u een vakantie of een periode van afwezigheid opgeven. Er kunnen op één scherm 2 periodes opgegeven worden. Eventueel kunt u bij 'Overig' meerdere periodes doorgeven.

Voer eerst de datum van vertrek in en daarna op dezelfde regel de datum van terugkomst. In het vakje 'Taal' kunt u de taal kiezen van het land waar u naar toe gaat. In het vakje 'Land' kunt u aangeven naar welk land u toe gaat.

4.6.2.9 Ongeval/ valpartij

Hier kunt u aangeven of u een ongeval/valpartij heeft gehad, met de bijbehorende datum.

4.6.2.10 Overig

Hier kunt u overige zaken melden of een toelichting geven op een van de andere onderwerpen.



- Wanneer u een bijzonderheid heeft ingevoerd, dan wordt de bijzonderheid roze gekleurd.



- LET OP: Bij Medicatie, Bloeding en Medische ingreep moet altijd 'Ja' of 'Nee' ingevuld worden.

Als u klaar bent met het invullen van de lijst bijzonderheden, dan klikt u op 'Bevestig'. U krijgt een overzicht scherm met de ingevoerde bijzonderheden. Indien nodig kunt u de bijzonderheid verwijderen door op  te klikken. Met de knop 'Versturen' worden de bijzonderheden verzonden naar uw trombosedienst.

4.6.3 Contactgegevens

Hier vindt u de contactgegevens van uw trombosedienst en van de helpdesk van ASolutions Healthcare.

4.6.4 Instellingen

Deze optie is enkel beschikbaar indien uw trombosedienst deze optie ondersteunt. Wanneer de optie niet wordt ondersteund, dan is de keuze 'Instellingen' niet zichtbaar in uw menu.

U kunt hier zelf instellen of u notificaties (pushberichten) wilt ontvangen. Een pushbericht is een kort bericht dat op het scherm van uw telefoon wordt getoond, ook al is de Tropaz app niet geopend.



Als u een pushbericht op uw toestel ontvangt en u klikt hier op, dan kunt u direct doorloggen naar het juiste scherm in de Tropaz app.

In de app wordt de notificatie weergegeven door middel van een groen bolletje bij het juiste onderwerp. Wanneer u het betreffende onderwerp heeft bekeken, dan verdwijnt het groene bolletje.



Het instellen van pushberichten

Met de optie 'Ontvang notificaties' worden de volgende pushberichten verzonden:

- **Nieuw bericht ontvangen:**
U heeft een nieuw bericht ontvangen.
- **Nieuwe kalender ontvangen:**
Uw nieuwe kalender is aangemaakt.

De volgende notificatie ontvangt u indien u aan huis geprikt wordt:


- **Herinnering thuisprik afspraak:**
Op "datum" komt de prikster bij u aan huis.

De notificatie voor 'Herinnering medicatie' kunt u apart instellen met de optie 'Ontvang herinneringsnotificatie voor het innemen van medicatie'. Hierbij kunt u ook een tijd ingeven wanneer u de herinnering wilt ontvangen.

- **Herinnering medicatie:**
Vergeet uw antistollingsmedicatie niet in te nemen. Vink na inname de tabletten af in de app.

4.6.5 Help

Onder 'Help' vindt u de e-learning van de Tropaz app. U kunt de e-learning in de app bekijken door er doorheen te scrollen of u kunt de e-learning op internet bekijken. Voor de laatste optie kiest u voor 'Open in browser', er wordt een internetpagina op uw toestel geopend met de e-learning. Let op: Wanneer u terug gaat naar de app, dan dient u opnieuw in te loggen.

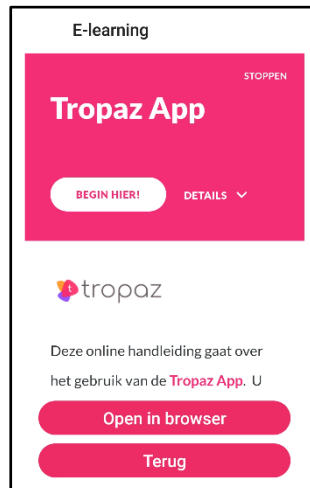

4.6.6 Afmelden

Kiest u in het menu voor 'Afmelden' dan logt de Tropaz app uit en gaat u terug naar het inlogscherf.

5 Tropaz app voor zelfmeters


5.1 Algemeen

De gegevens in de app zijn pas na 17.00 uur definitief. Als er een nieuwe kalender voor u is aangemaakt of er een bericht naar u is verstuurd, wordt u hiervan op de hoogte gesteld middels een e-mail. Let op gedurende de dag kunnen er nog wijzigingen aangebracht worden in uw doseerschema. Wij adviseren u daarom om pas na 17.00 uur uw tabletten in te nemen.

Op het scherm staan onderaan 4 selectiemogelijkheden, te weten: 'Vandaag', 'Afspraak', 'Kalender' en 'INR'. De Tropaz app start met de selectie 'Vandaag'. U kunt andere selecties selecteren door erop te klikken. De selecties worden in de volgende paragrafen besproken.

5.2 Vandaag


U ziet direct de hoeveelheid tabletten van uw antistollingsmiddel dat u vandaag in mag nemen.

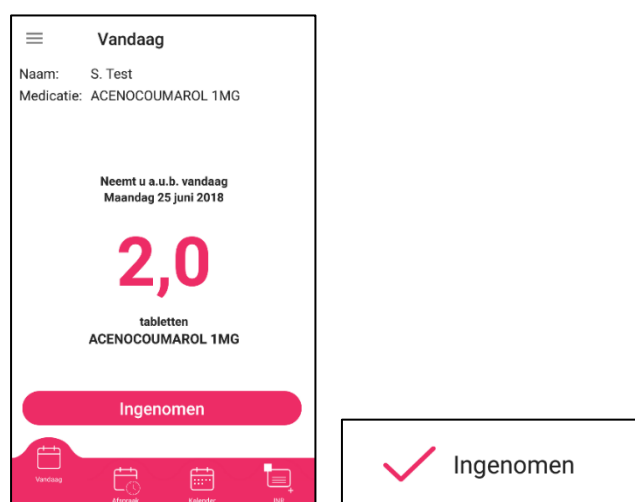

Wanneer u de tabletten van de trombosedienst heeft ingenomen, kunt u dat hier afvinken door onder het aantal tabletten op 'Ingenomen' te klikken. Dit kunt u dan tevens terug zien in de kalender, zie paragraaf 5.4.

5.3 Afspraak

Op het tabblad 'Afspraak' vindt u uw volgende controledatum bij de trombosedienst. Tevens wordt de afspraak voor de controle van de CoaguChek op dit tabblad getoond.

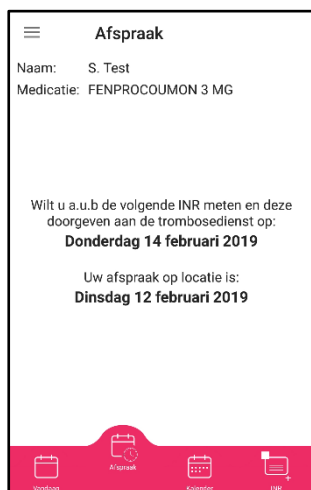

5.4 Kalender

Op het kalenderscherm in de Tropaz app ziet u de meest recente doseringskalender met per dag het aantal tabletten antistollingsmiddel dat u mag innemen. Datums in het verleden zijn lichtgrijs weergegeven. De huidige dag (vandaag) is roze en de toekomstige dagen zijn zwart. De twee laatste kalenders bekend bij de trombosedienst worden getoond in de app.

Datum	Aantal tabletten
Vrijdag 22 juni 2018	2,0
Zaterdag 23 juni 2018	2,0
Zondag 24 juni 2018	2,0
Maandag 25 juni 2018	2,0 ✓
Dinsdag 26 juni 2018	2,0
Woensdag 27 juni 2018	2,0
Donderdag 28 juni 2018	2,0


Indien u op het scherm 'Vandaag' heeft aangeklikt 'Ingenomen', dan wordt er in dit scherm een vinkje geplaatst achter de betreffende datum. Zo kunt u de gedurende kalender in de gaten houden of u elke dag uw tabletten heeft ingenomen.

5.5 INR

Op het INR scherm kunt u uw gemeten INR en eventuele bijzonderheden invoeren.

5.5.1 INR invoeren

- Het invoerveld **INR** is leeg bij het openen van het scherm. Het invoeren van de INR waarde kan door een waarde te kiezen uit de keuzelijst door erop te klikken. De mogelijke waarden zijn van 0,8 t/m 8,0 of > 8.0. Deze laatste mogelijkheid gebruikt u om aan te geven dat uw waarde hoger is dan 8.0.
- Omdat het belangrijk is dat bij de invoer van de INR geen typefouten gemaakt worden, wordt u gevraagd de INR tweemaal in te voeren bij 'Bevestig INR'. Bij het opslaan wordt hierop gecontroleerd, zijn de INR waardes niet gelijk dan krijgt u de foutmelding:

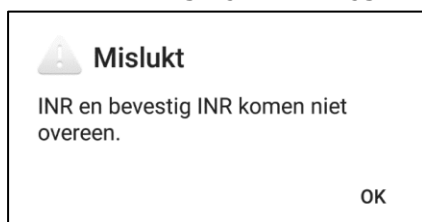

- Voert u een INR > (hoger dan) 7,9 in, dan krijgt u de melding:



U meet nogmaals uw INR en voert deze vervolgens in.

- Is de INR bij de tweede meting wederom > 7,9 en u klikt op 'Opslaan', dan krijgt u de melding:



Let op: De INR wordt niet verstuurd naar de trombosedienst.

- Wanneer een INR wordt ingevoerd en er is op de desbetreffende datum al een INR ingevoerd, dan wordt gecontroleerd of deze INR al is verwerkt door de trombosedienst. Indien dit het geval is, wordt een melding gegeven dat

het niet meer mogelijk is om een INR op deze datum in te voeren.

- Is er al een INR ingevoerd, maar is deze is nog niet verwerkt door de trombosedienst, dan wordt de nieuwe INR waarde vastgelegd bij de trombosedienst en wordt de voorgaande INR waarde door de trombosedienst verwijderd.

5.5.2 Bijzonderheden

Wanneer u op 'Bevestig' heeft geklikt, krijgt u de melding of u nog bijzonderheden wilt doorgeven. Indien u bijzonderheden wilt doorgeven, dan klikt u op 'Ja' en wordt u doorgestuurd naar het tabblad bijzonderheden (zie paragraaf 5.6.2).

Bijzonderheden

Wilt u nog bijzonderheden doorgeven?

Nee Ja

5.6 Menu

Het menu van de Tropaz app vindt u linksboven op het scherm. In het menu kunt u kiezen voor Berichten, Bijzonderheden, Historie, Bluetooth, Contactgegevens, Instellingen, Help of Afmelden.



5.6.1 Berichten

Hier vindt u de berichten die zijn verstuurd aan of van uw trombosedienst.

Met 'Nieuw' kunt u een nieuw bericht aan de trombosedienst versturen. Met 'Beantwoorden' kunt u een bericht van de trombosedienst beantwoorden.

5.6.2 Bijzonderheden

In dit scherm kunt u eventuele bijzonderheden doorgeven aan de trombosedienst.

Bijzonderheden

Medicatie? Ja Nee

Bloeding? Ja Nee

Medische ingreep? Ja Nee

Koorts Braken Diarree

Tabletten vergeten Vakantie Ongeval/valpartij

Overig

Terug Bevestig

Hieronder volgt een korte toelichting per bijzonderheid en worden de bijbehorende schermen met de gevraagde invoervelden uitgelegd.

5.6.2.1 Medicatie

Medicatie? Ja Nee

Als u een nieuw medicijn bent gaan gebruiken of gaat gebruiken dan kunt u dat hier invoeren door de start en de naam van het medicijn in te voeren.

Gebruikershandleiding Tropaz app

Medicatie toevoegen

Startdatum

Stopdatum

Medicijn

Dosering

Als u het medicijn een korte periode gebruikt, bijvoorbeeld een antibioticumkuur, kunt u ook direct de stopdatum invoeren. Als u stopt met het gebruik van een medicijn dan kunt u de stopdatum invullen en de naam van het betreffende medicijn. Het is dan niet verplicht om ook de startdatum in te voeren. Zo nodig geeft u toelichting door bij 'Overig' een toelichting te geven. Deze mogelijkheid staat als laatste in de lijst van de bijzonderheden.

Er kunnen op één scherm 2 nieuwe medicijnen opgegeven worden.

5.6.2.2 Bloeding

Bloeding?

Ja

Nee

Bij deze bijzonderheid kan u de datum en de soort bloeding aangeven. Zo nodig geeft u een toelichting bij 'Overig'.

Bloeding

Heeft u blauwe plekken en/of een bloeding gehad?

☐ Blauwe plekken?

☐ Bloedneus?

☐ Bloed in urine?

☐ Bloed in ontlasting?

☐ Anders (bijv. bloeddorpen ogen)

5.6.2.3 Medische ingreep

Medische ingreep?

Ja

Nee

Hier kunt u een geplande ingreep doorgeven. Voer de datum en daarna de soort ingreep in. Vervolgens kunt de naam van uw behandelend arts en de naam van het ziekenhuis invoeren. Als uw specialist of trombosedienst heeft aangegeven dat de INR naar een bepaalde waarde moet worden verlaagd, dan kunt u dit ook invoeren.

Geplande ingreep

Datum

Omschrijving

☐ Opname

☐ Dagbehandeling

Naam specialist

Naam ziekenhuis

Specialisme

Gewenste INR volgens uw specialist -

Opmerkingen

5.6.2.4 Koorts

Hier kunt u, met de bijbehorende begindatum en einddatum opgeven als u koorts heeft gehad en hoe hoog de koorts was. Zo nodig geeft u een toelichting bij 'Overig'.

Koorts

Van

T/m

Temperatuur (graden)

5.6.2.5 Braken

Hier kunt u, met de bijbehorende begindatum en einddatum opgeven als u gebraakt heeft. Zo nodig geeft u een toelichting bij 'Overig'.

Braken

Van

T/m

☐ Heeft u gebraakt binnen 1/2 uur na inname antistollingstabletten?

5.6.2.6 Diarree

Hier kunt u, met de bijbehorende begindatum en einddatum opgeven als u diarree heeft gehad. Zo nodig geeft u een toelichting bij 'Overig'.

Diarree

Van

T/m

5.6.2.7 Tabletten vergeten

Hier kunt u aangeven wanneer u de tabletten vergeten bent, met de bijbehorende datum.

Tabletten vergeten?

Datum

Datum

5.6.2.8 Vakantie

Hier kunt u een vakantie of een periode van afwezigheid opgeven. Er kunnen op één scherm 2 periodes opgegeven worden. Eventueel kunt u bij 'Overig' meerdere periodes doorgeven.

Vakanties/afwezigheid toevoegen

Vanaf

T/m

Taal

Land

Voer eerst de datum van vertrek in en daarna op dezelfde regel de datum van terugkomst. In het vakje 'Taal' kunt u de taal kiezen van het land waar u naar toe gaat. In het vakje 'Land' kunt u aangeven naar welk land u toe gaat.

5.6.2.9 Ongeval/ valpartij

Hier kunt u aangeven of u een ongeval/valpartij heeft gehad, met de bijbehorende datum.

Ongeval/valpartij

Datum

Letsel

☐ Bent u bij een arts/ziekenhuis geweest?

Toelichting

5.6.2.10 Overig

Hier kunt u overige zaken melden of een toelichting geven op een van de andere onderwerpen.

- Wanneer u een bijzonderheid heeft ingevoerd, dan wordt de bijzonderheid roze gekleurd.



- LET OP: Bij Medicatie, Bloeding en Medische ingreep moet altijd 'Ja' of 'Nee' ingevuld worden.

Als u klaar bent met het invullen van de lijst bijzonderheden, dan klikt u op 'Bevestig'. U krijgt een overzicht scherm met de ingevoerde bijzonderheden. Indien nodig kunt u de bijzonderheid verwijderen door op  te klikken. Met de knop 'Versturen' worden de bijzonderheden verzonden naar uw trombosedienst.

5.6.3 Historie

Op het historiescherm ziet u de bij u in het verleden gemeten INR waarden op volgorde van datum weergegeven.

5.6.4 Bluetooth


Deze functionaliteit is alleen van toepassing als u gebruik maakt van een CoaguChek INRange. U kunt uw gemeten INR waarde via de Bluetooth koppeling doorsturen naar de Tropaz app. Hierdoor hoeft u de INR niet meer handmatig in te voeren. Hieronder staat beschreven hoe u de Bluetooth koppeling tot stand kunt brengen.

5.6.3.1 Koppelen

- Klik in de Tropaz app op het menu en daarna op 'Bluetooth'.
- Zet uw CoaguChek INRange aan.
- Ga op uw CoaguChek via Instellingen naar Gegevensoverdracht en selecteer met de enter toets 'Bluetooth'.
- Wanneer op uw CoaguChek INRange 'Activering Bluetooth' zichtbaar is, dan kunt u in de Tropaz app op 'Zoeken' klikken.
- Klik in de Tropaz app op de CoaguChek wanneer deze zichtbaar wordt.

Naam	Serienummer
CoaguChek	00049179


- Er wordt een melding gegeven wanneer het koppelen is geslaagd.

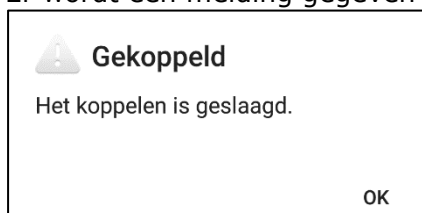

5.6.3.2 Encryptiesleutel

Om de activering te voltooien dient er tot slot een code (encryptiesleutel) ingevuld te worden.

worden. U kunt de code handmatig invoeren of (wanneer uw CoaguChek INRange dit ondersteunt) de code scannen.

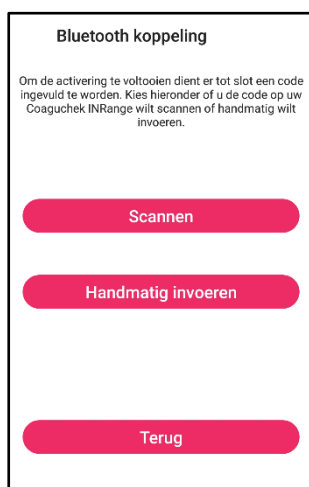

Indien u de code handmatig in wilt voeren, kunt u onderstaande stappen volgen:


1. Klik in de Tropaz app op 'Handmatig invoeren'.
2. Ga op uw CoaguChek via 'Overige' naar 'Over'.
3. Ga met de enter toets naar de tweede pagina. Typ de versleutelingscode over in de Tropaz app in de vakken en klik op 'Opslaan'.

Wanneer u kiest om de code te scannen, dan kunt u onderstaande stappen volgen:

1. Schakel de CoaguChek uit.
2. Open het klepje van de batterijen en verwijder de batterijen.
3. Achter de batterijen is een vierkant met blokjes zichtbaar.
4. Klik in de Tropaz app op 'Scannen' en scan met uw telefoon het vierkant met blokjes (varieer de afstand met uw telefoon).

5.6.3.3 INR uitlezen

Nadat de bluetooth koppeling is ingesteld, is er op het tabblad 'INR' de keuze 'CoaguChek' zichtbaar. Hiermee kunt u de gemeten INR doorsturen van de CoaguChek naar de Tropaz app.

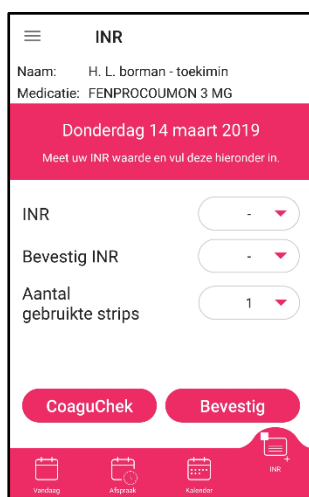


1. Ga in de Tropaz app naar 'INR' en kies voor 'CoaguChek'.

2. Zet uw CoaguChek aan.
3. Ga naar 'Mijn Resultaten' en selecteer met de enter toets 'Overdracht van gegevens'.
4. Wanneer op uw CoaguChek 'Overdracht van gegevens' zichtbaar is, dan kunt u in de Tropaz app op 'Uitlezen' klikken.
5. De INR waarde wordt zichtbaar in de Tropaz app.

Datum/tijd meting	INR-waarde
Donderdag 22 maart 2018 05:53	2,4

6. Klik op 'Bevestig' en voer eventuele bijzonderheden in zoals beschreven in paragraaf 5.6.2.

Let op: de gemeten INR waarde mag niet ouder zijn dan een half uur. U krijgt een melding dat de meting niet verstuurd wordt.

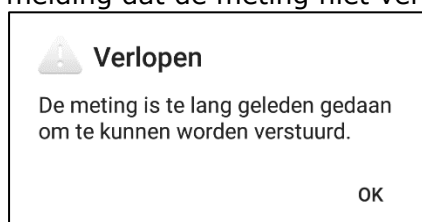

5.6.3.4 Verwijderen

Wanneer u geen gebruik meer wilt maken van de Bluetooth koppeling, dan kunt u via bluetooth in het menu klikken op 'Verwijderen'.

5.6.5 Contactgegevens

Hier vindt u de contactgegevens van uw trombosedienst en van de helpdesk van ASolutions Healthcare.

5.6.6 Instellingen

Deze optie is enkel beschikbaar indien uw trombosedienst deze optie ondersteunt. Wanneer de optie niet wordt ondersteund, dan is de keuze 'Instellingen' niet zichtbaar in uw menu.

U kunt hier zelf instellen of u notificaties (pushberichten) wilt ontvangen. Een pushbericht is een kort bericht dat op het scherm van uw telefoon wordt getoond, ook al is de Tropaz app niet geopend.




Als u een pushbericht op uw toestel ontvangt en u klikt hier op, dan kunt u direct doorloggen naar het juiste scherm in de Tropaz app.

In de app wordt de notificatie weergegeven door middel van een groen bolletje bij het juiste onderwerp. Wanneer u het betreffende onderwerp heeft bekeken, dan verdwijnt het groene bolletje.



Het instellen van pushberichten

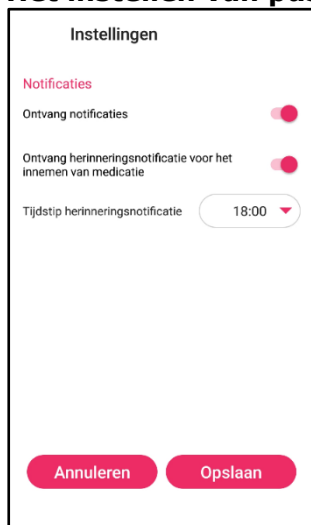

Met de optie 'Ontvang notificaties' worden de volgende pushberichten verzonden:


- **Herinnering INR invoeren:**
Wij herinneren u aan het doorgeven van uw INR waarde op "datum".
- **Herinnering vergeten INR in te voeren:**
Op "datum" diende u uw INR waarde door te geven. Wij hebben uw INR waarde tot op heden nog niet ontvangen.
- **Herinnering afspraak controle CoaguChek:**
Op "datum" wordt u verwacht voor de controle van uw meetapparaat.
- **Nieuw bericht ontvangen:**
U heeft een nieuw bericht ontvangen.
- **Nieuwe kalender ontvangen:**
Uw nieuwe kalender is aangemaakt.

De notificatie voor 'Herinnering medicatie' kunt u apart instellen met de optie 'Ontvang herinneringsnotificatie voor het innemen van medicatie'. Hierbij kunt u ook een tijd ingeven wanneer u de herinnering wilt ontvangen.

- **Herinnering medicatie:**
Vergeet uw antistollingsmedicatie niet in te nemen. Vink na inname de tabletten af in de app.

5.6.7 Help

Onder 'Help' vindt u de e-learning van de Tropaz app. U kunt de e-learning in de app bekijken door er doorheen te scrollen of u kunt de e-learning op internet bekijken. Voor de laatste optie kiest u voor 'Open in browser', er wordt een internetpagina op uw toestel geopend met de e-learning. Let op: Wanneer u terug gaat naar de app, dan dient u opnieuw in te loggen.

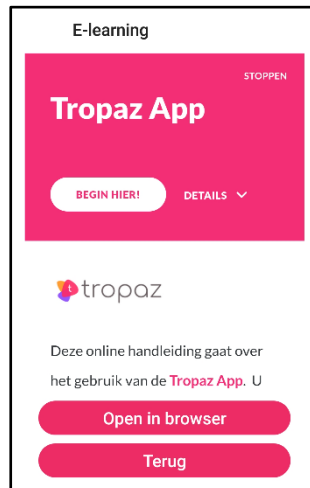

5.6.8 Afmelden

Kiest u in het menu voor 'Afmelden' dan logt de Tropaz app uit en gaat u terug naar het inlogscherf.

6 Tropaz app voor zelfdoseerders


6.1 Algemeen

De gegevens in de app zijn pas na 17.00 uur definitief. Als er een nieuwe kalender voor u is aangemaakt of er een bericht naar u is verstuurd, wordt u hiervan op de hoogte gesteld middels een e-mail. Let op gedurende de dag kunnen er nog wijzigingen aangebracht worden in uw doseerschema. Wij adviseren u daarom om pas na 17.00 uur uw tabletten in te nemen.

Op het scherm staan onderaan 4 selectiemogelijkheden, te weten: 'Vandaag', 'Afspraak', 'Kalender' en 'INR'. De Tropaz app start met de selectie 'Vandaag'. U kunt andere selecties selecteren door erop te klikken. De selecties worden in de volgende paragrafen besproken.

6.2 Vandaag


U ziet direct de hoeveelheid tabletten van uw antistollingsmiddel dat u vandaag in mag nemen.

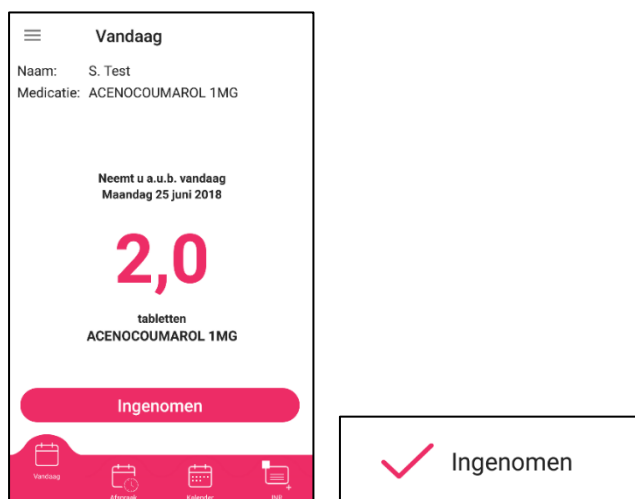

Wanneer u de tabletten van de trombosedienst heeft ingenomen, kunt u dat hier afvinken door onder het aantal tabletten op 'Ingenomen' te klikken. Dit kunt u dan tevens terug zien in de kalender, zie paragraaf 6.4.

6.3 Afspraak

Op het tabblad 'Afspraak' vindt u uw volgende controledatum bij de trombosedienst. Tevens wordt de afspraak voor de controle van de CoaguChek op dit tabblad getoond.

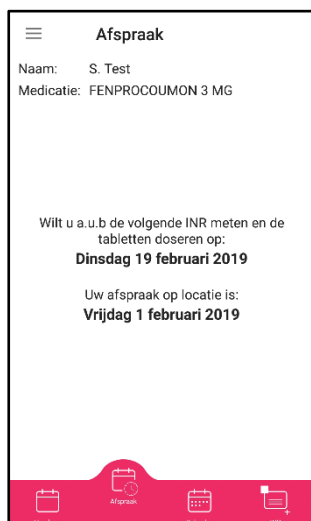

6.4 Kalender

Op het kalenderscherm in de Tropaz app ziet u de meest recente doseringskalender met per dag het aantal tabletten antistollingsmiddel dat u mag innemen. Datums in het verleden zijn lichtgrijs weergegeven. De huidige dag (vandaag) is roze en de toekomstige dagen zijn zwart. De twee laatste kalenders bekend bij de trombosedienst worden getoond in de app.

Datum	Aantal tabletten
Vrijdag 22 juni 2018	2,0
Zaterdag 23 juni 2018	2,0
Zondag 24 juni 2018	2,0
Maandag 25 juni 2018	2,0 ✓
Dinsdag 26 juni 2018	2,0
Woensdag 27 juni 2018	2,0
Donderdag 28 juni 2018	2,0

Indien u op het scherm 'Vandaag' heeft aangeklikt 'Ingenomen', dan wordt er in dit scherm een vinkje geplaatst achter de betreffende datum. Zo kunt u de gedurende kalender in de gaten houden of u elke dag uw tabletten heeft ingenomen.

6.5 INR

Op het INR scherm kunt u uw gemeten INR, uw doseerschema en eventuele bijzonderheden invoeren.

The screenshot shows the 'INR' screen in the Tropaz app. At the top, it displays the patient's name 'H. L. borman - toekimin' and the medication 'FENPROCOUMON 3 MG'. Below this, a pink header indicates the date 'Donderdag 14 maart 2019' and prompts the user to 'Meet uw INR waarde en vul deze hieronder in.' The main form contains three fields: 'Datum' (set to 14 maart 2019), 'INR' (with a dropdown menu showing '-'), 'Bevestig INR' (also with a dropdown menu showing '-'), and 'Aantal gebruikte strips' (set to 1). A pink 'Bevestig' button is at the bottom. The bottom navigation bar shows icons for 'Overzicht', 'Attesten', 'Aanvragen', and 'Profiel'.

6.5.1 Datum

- De huidige datum staat standaard ingevuld. Deze kan gewijzigd worden door op de datum te klikken.
- U kunt een datum en INR in het verleden invullen maar deze moet wel na de laatst ingevoerde INR liggen. Anders is het niet meer mogelijk deze in te vullen.

6.5.2 INR invoeren

- Het invoerveld **INR** is leeg bij het openen van het scherm. Het invoeren van de INR waarde kan door een waarde te kiezen uit de keuzelijst door erop te klikken. De mogelijke waarden zijn van 0,8 t/m 8,0 of > 8.0. Deze laatste mogelijkheid gebruikt u om aan te geven dat uw waarde hoger is dan 8.0.
- Omdat het belangrijk is dat bij de invoer van de INR geen typefouten gemaakt worden, wordt u gevraagd de INR tweemaal in te voeren bij 'Bevestig INR'. Bij het opslaan wordt hierop gecontroleerd, zijn de INR waarden niet gelijk dan krijgt u de foutmelding:



- Voert u een INR > (hoger dan) 7,9 in, dan krijgt u de melding:



U meet nogmaals uw INR en voert deze vervolgens in.

- Is de INR bij de tweede meting wederom > 7,9 en u klikt op 'Opslaan', dan krijgt u de melding:



Let op: De INR wordt niet verstuurd naar de trombosedienst.

- Wanneer een INR wordt ingevoerd en er is op de desbetreffende datum al een INR ingevoerd, dan wordt gecontroleerd of deze INR al is verwerkt door de trombosedienst. Indien dit het geval is, wordt een melding gegeven dat het niet meer mogelijk is om een INR op deze datum in te voeren.
- Is er al een INR ingevoerd, maar is deze is nog niet verwerkt door de trombosedienst, dan wordt de nieuwe INR waarde vastgelegd bij de trombosedienst en wordt de voorgaande INR waarde door de trombosedienst verwijderd.

6.5.3 Doseerschema

Wanneer u op 'Bevestig' heeft geklikt, krijgt u het scherm om uw schema in te voeren.

- Indien nodig kiest u 'Voorloop'. Dit is de dosering van de huidige dag indien afwijkend.

- Vervolgens kan de gemiddelde dosering ingevuld worden. Afhankelijk van de INR waarde wordt deze d.m.v. het afrolmenu (m.b.v. pijltje) wel of niet aangepast.

- U kunt kiezen om de stap 'Laag' in te laten gaan, u begint dan met de laagste dosering. Daarnaast kunt u kiezen om de stap 'Hoog' in te laten gaan, u begint dan met de hoogste dosering. Tevens kunt u kiezen om uw oude stap te handhaven, dit kunt u doen met 'In schema'.

- Daarna vult u het aantal dagen in.

Aantal dagen

- Wanneer u dan op 'Dosereren' klikt worden automatisch de dagen met het aantal tabletten gevuld.

Dosereren

6.5.4 Bijzonderheden

Wanneer u op 'Bevestig' heeft geklikt, krijgt u de melding of u nog bijzonderheden wilt doorgeven. Indien u bijzonderheden wilt doorgeven, dan klikt u op 'Ja' en wordt u doorgestuurd naar het tabblad bijzonderheden (zie paragraaf 6.6.2).

Bijzonderheden
Wilt u nog bijzonderheden doorgeven?

Nee Ja

6.6 Menu

Het menu van de Tropaz app vindt u linksboven op het scherm. In het menu kunt u kiezen voor Berichten, Bijzonderheden, Historie, Bluetooth, Contactgegevens, Instellingen, Help of Afmelden.



6.6.1 Berichten

Hier vindt u de berichten die zijn verstuurd aan of van uw trombosedienst. Met 'Nieuw' kunt u een nieuw bericht aan de trombosedienst versturen. Met 'Beantwoorden' kunt u een bericht van de trombosedienst beantwoorden.

6.6.2 Bijzonderheden

In dit scherm kunt u eventuele bijzonderheden doorgeven aan de trombosedienst.

Bijzonderheden

Medicatie?

Bloeding?

Medische ingreep?

Koorts

Braken

Diarree

Tabletten vergeten

Vakantie

Ongeval/valpartij

Overig

Terug **Bevestig**

Hieronder volgt een korte toelichting per bijzonderheid en worden de bijbehorende schermen met de gevraagde invoervelden uitgelegd.

6.6.2.1 Medicatie

 Medicatie?	Ja	Nee
--	----	-----

Als u een nieuw medicijn bent gaan gebruiken of gaat gebruiken dan kunt u dat hier invoeren door de start en de naam van het medicijn in te voeren.

Medicatie toevoegen

Startdatum



Stopdatum



Medicijn

Dosering

Als u het medicijn een korte periode gebruikt, bijvoorbeeld een antibioticumkuur, kunt u ook direct de stopdatum invoeren. Als u stopt met het gebruik van een medicijn dan kunt u de stopdatum invullen en de naam van het betreffende medicijn. Het is dan niet verplicht om ook de startdatum in te voeren. Zo nodig geeft u toelichting door bij 'Overig' een toelichting te geven. Deze mogelijkheid staat als laatste in de lijst van de bijzonderheden.

Er kunnen op één scherm 2 nieuwe medicijnen opgegeven worden.

6.6.2.2 Bloeding

 Bloeding?	Ja	Nee
---	----	-----

Bij deze bijzonderheid kan u de datum en de soort bloeding aangeven. Zo nodig geeft u een toelichting bij 'Overig'.

Bloeding

Heeft u blauwe plekken en/of een bloeding gehad?

☐ Blauwe plekken?

☐ Bloedneus?

☐ Bloed in urine?

☐ Bloed in ontlasting?

☐ Anders (bijv. bloeddorlopen ogen)

6.6.2.3 Medische ingreep

 Medische ingreep?	Ja	Nee
---	----	-----

Hier kunt u een geplande ingreep doorgeven. Voer de datum en daarna de soort ingreep in. Vervolgens kunt de naam van uw behandelend arts en de naam van het ziekenhuis invoeren. Als uw specialist of trombosedienst heeft aangegeven dat de INR naar een bepaalde waarde moet worden verlaagd, dan kunt u dit ook invoeren.

Geplande ingreep

Datum

Omschrijving

☐ Opname

☐ Dagbehandeling

Naam specialist

Naam ziekenhuis

Specialisme

Gewenste INR volgens uw specialist -

Opmerkingen

6.6.2.4 Koorts

Hier kunt u, met de bijbehorende begindatum en einddatum opgeven als u koorts heeft gehad en hoe hoog de koorts was. Zo nodig geeft u een toelichting bij 'Overig'.

Koorts

Van

T/m

Temperatuur (graden)

6.6.2.5 Braken

Hier kunt u, met de bijbehorende begindatum en einddatum opgeven als u gebraakt heeft. Zo nodig geeft u een toelichting bij 'Overig'.

Braken

Van

T/m

☐ Heeft u gebraakt binnen 1/2 uur na inname antistollingstabletten?

6.6.2.6 Diarree

Hier kunt u, met de bijbehorende begindatum en einddatum opgeven als u diarree heeft gehad. Zo nodig geeft u een toelichting bij 'Overig'.

Diarree

Van

T/m

6.6.2.7 Tabletten vergeten

Hier kunt u aangeven wanneer u de tabletten vergeten bent, met de bijbehorende datum.

6.6.2.8 Vakantie

Hier kunt u een vakantie of een periode van afwezigheid opgeven. Er kunnen op één scherm 2 periodes opgegeven worden. Eventueel kunt u bij 'Overig' meerdere periodes doorgeven.

Voer eerst de datum van vertrek in en daarna op dezelfde regel de datum van terugkomst. In het vakje 'Taal' kunt u de taal kiezen van het land waar u naar toe gaat. In het vakje 'Land' kunt u aangeven naar welk land u toe gaat.

6.6.2.9 Ongeval/ valpartij

Hier kunt u aangeven of u een ongeval/valpartij heeft gehad, met de bijbehorende datum.

6.6.2.10 Overig

Hier kunt u overige zaken melden of een toelichting geven op een van de andere onderwerpen.

- Wanneer u een bijzonderheid heeft ingevoerd, dan wordt de bijzonderheid roze gekleurd.



- LET OP:** Bij Medicatie, Bloeding en Medische ingreep moet altijd 'Ja' of 'Nee' ingevuld worden.

Als u klaar bent met het invullen van de lijst bijzonderheden, dan klikt u op 'Bevestig'. U krijgt een overzicht scherm met de ingevoerde bijzonderheden. Indien nodig kunt u de bijzonderheid verwijderen door op  te klikken. Met de knop 'Versturen' worden de bijzonderheden verzonden naar uw trombosedienst.

6.6.3 Historie

Op het historiescherm ziet u de bij u in het verleden gemeten INR waarden op volgorde van datum weergegeven.

6.6.4 Bluetooth


Deze functionaliteit is alleen van toepassing als u gebruik maakt van een CoaguChek INRange. U kunt uw gemeten INR waarde via de Bluetooth koppeling doorsturen naar de Tropaz app. Hierdoor hoeft u de INR niet meer handmatig in te voeren. Hieronder staat beschreven hoe u de Bluetooth koppeling tot stand kunt brengen.

6.6.3.1 Koppelen

- Klik in de Tropaz app op het menu en daarna op 'Bluetooth'.
- Zet uw CoaguChek INRange aan.
- Ga op uw CoaguChek via Instellingen naar Gegevensoverdracht en selecteer met de enter toets 'Bluetooth'.
- Wanneer op uw CoaguChek INRange 'Activering Bluetooth' zichtbaar is, dan kunt u in de Tropaz app op 'Zoeken' klikken.
- Klik in de Tropaz app op de CoaguChek wanneer deze zichtbaar wordt.

Naam	Serienummer
CoaguChek	00049179

- Er wordt een melding gegeven wanneer het koppelen is geslaagd.

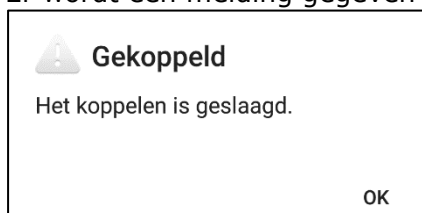

6.6.3.2 Encryptiesleutel

Om de activering te voltooien dient er tot slot een code (encryptiesleutel) ingevuld te worden.

worden. U kunt de code handmatig invoeren of (wanneer uw CoaguChek INRange dit ondersteunt) de code scannen.

Bluetooth koppeling

Om de activering te voltooien dient er tot slot een code ingevuld te worden. Kies hieronder of u de code op uw CoaguChek INRange wilt scannen of handmatig wilt invoeren.

Scannen

Handmatig invoeren

Terug

Indien u de code handmatig in wilt voeren, kunt u onderstaande stappen volgen:

1. Klik in de Tropaz app op 'Handmatig invoeren'.
2. Ga op uw CoaguChek via 'Overige' naar 'Over'.
3. Ga met de enter toets naar de tweede pagina. Typ de versleutelingscode over in de Tropaz app in de vakken en klik op 'Opslaan'.

Wanneer u kiest om de code te scannen, dan kunt u onderstaande stappen volgen:

1. Schakel de CoaguChek uit.
2. Open het klepje van de batterijen en verwijder de batterijen.
3. Achter de batterijen is een vierkant met blokjes zichtbaar.
4. Klik in de Tropaz app op 'Scannen' en scan met uw telefoon het vierkant met blokjes (varieer de afstand met uw telefoon).

6.6.3.3 INR uitlezen

Nadat de bluetooth koppeling is ingesteld, is er op het tabblad 'INR' de keuze 'CoaguChek' zichtbaar. Hiermee kunt u de gemeten INR doorsturen van de CoaguChek naar de Tropaz app.

INR

Naam: H. L. borman - toekimin
Medicatie: FENPROCOUMON 3 MG

Donderdag 14 maart 2019
Meet uw INR waarde en vul deze hieronder in.

Datum: 14 maart 2019

INR: 2,0

Bevestig INR: 2,0

Aantal gebruikte strips: 1

CoaguChek Bevestig

Overzicht Kalender Kalender INR


1. Ga in de Tropaz app naar 'INR' en kies voor 'CoaguChek'.
2. Zet uw CoaguChek aan.

3. Ga naar 'Mijn Resultaten' en selecteer met de enter toets 'Overdracht van gegevens'.
4. Wanneer op uw CoaguChek 'Overdracht van gegevens' zichtbaar is, dan kunt u in de Tropaz app op 'Uitlezen' klikken.
5. De INR waarde wordt zichtbaar in de Tropaz app.

Datum/tijd meting	INR-waarde
Donderdag 22 maart 2018 05:53	2,4

6. Klik op 'Bevestig' voor uw doseerschema in zoals beschreven in paragraaf 6.5.3.

Let op: de gemeten INR waarde mag niet ouder zijn dan een half uur. U krijgt een melding dat de meting niet verstuurd wordt.

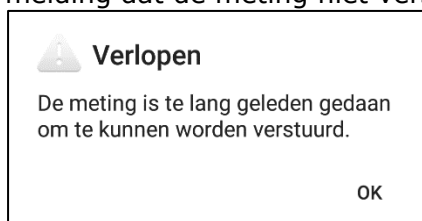

6.6.3.4 Verwijderen

Wanneer u geen gebruik meer wilt maken van de Bluetooth koppeling, dan kunt u via bluetooth in het menu klikken op 'Verwijderen'.

6.6.5 Contactgegevens

Hier vindt u de contactgegevens van uw trombosedienst en van de helpdesk van ASolutions Healthcare.

6.6.6 Instellingen

Deze optie is enkel beschikbaar indien uw trombosedienst deze optie ondersteunt. Wanneer de optie niet wordt ondersteund, dan is de keuze 'Instellingen' niet zichtbaar in uw menu.

U kunt hier zelf instellen of u notificaties (pushberichten) wilt ontvangen. Een pushbericht is een kort bericht dat op het scherm van uw telefoon wordt getoond, ook al is de Tropaz app niet geopend.




Als u een pushbericht op uw toestel ontvangt en u klikt hier op, dan kunt u direct doorloggen naar het juiste scherm in de Tropaz app.

In de app wordt de notificatie weergegeven door middel van een groen bolletje bij het juiste onderwerp. Wanneer u het betreffende onderwerp heeft bekeken, dan verdwijnt het groene bolletje.



Het instellen van pushberichten

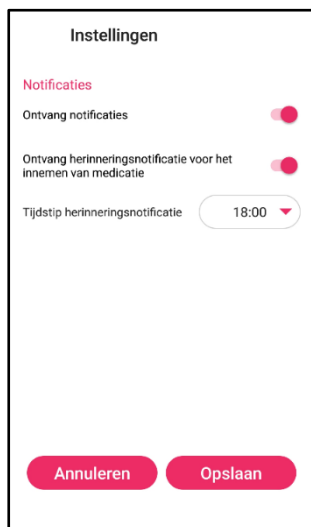

Met de optie 'Ontvang notificaties' worden de volgende pushberichten verzonden:


- **Herinnering INR invoeren:**
Wij herinneren u aan het doorgeven van uw INR waarde op "datum".
- **Herinnering vergeten INR in te voeren:**
Op "datum" diende u uw INR waarde door te geven. Wij hebben uw INR waarde tot op heden nog niet ontvangen.
- **Herinnering afspraak controle CoaguChek:**
Op "datum" wordt u verwacht voor de controle van uw meetapparaat.
- **Nieuw bericht ontvangen:**
U heeft een nieuw bericht ontvangen.
- **Nieuwe kalender ontvangen:**
Uw nieuwe kalender is aangemaakt.

De notificatie voor 'Herinnering medicatie' kunt u apart instellen met de optie 'Ontvang herinneringsnotificatie voor het innemen van medicatie'. Hierbij kunt u ook een tijd ingeven wanneer u de herinnering wilt ontvangen.

- **Herinnering medicatie:**
Vergeet uw antistollingsmedicatie niet in te nemen. Vink na inname de tabletten af in de app.

6.6.7 Help

Onder 'Help' vindt u de e-learning van de Tropaz app. U kunt de e-learning in de app bekijken door er doorheen te scrollen of u kunt de e-learning op internet bekijken. Voor de laatste optie kiest u voor 'Open in browser', er wordt een internetpagina op uw toestel geopend met de e-learning. Let op: Wanneer u terug gaat naar de app, dan dient u opnieuw in te loggen.

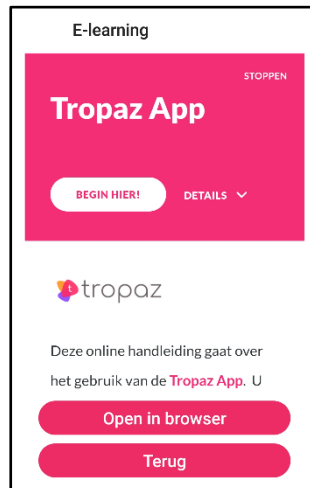

6.6.8 Afmelden

Kiest u in het menu voor 'Afmelden' dan logt de Tropaz app uit en gaat u terug naar het inlogscherf.